

ДИНАМИЧЕСКАЯ СТОПА BIOSTEP CL

Одна стопа, множество возможностей,
бесконечное наслаждение ходьбой!



Ваша повседневная спутница

Это классическая стопа, обладающая всеми преимуществами технологии NRG™ обеспечивает надежную адаптацию к опорной поверхности.

Рекомендуется для пользователей предпочитающих обычную или агрессивную ходьбу в городских условиях, а также пользователей, которым требуется надежная, прочная, долговечная и удобная динамическая стопа.

Естественная походка, биомиметический дизайн и быстрая реакция на изменение типа опорной поверхности.


NRG™ Технология

Вдохновлена природой, усилена технологией

NRG™ — Естественная Энергосберегающая Походка (Natural Reactive Gait) — это инновационная запатентованная технология изготовления протезных стоп с динамической реакцией на изменение типа опорной поверхности предназначенная для воспроизведения естественного движения стопы, а также голенных и икроножных мышц.



Влагозащищенная стопа

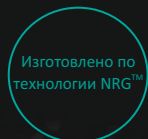

Технология NRG™



Уникальная многослойная конструкция



Динамическая система икроножной области и голени



Расщепленная пружина мыска стопы



Диапазон движения 26°



Осевое вращение 16°



Цельная монолитная конструкция

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Физиологическая энергосберегающая походка
- ♦ Плавный перекал во время всего цикла ходьбы
- ♦ Прекрасная динамическая реакция на изменение типа опорной поверхности для пользователей с высоким уровнем двигательной активности
- ♦ Возможность заниматься различными видами деятельности без использования вспомогательных средств
- ♦ Прекрасная адаптация к опорной поверхности и повышенная устойчивость на неровном ландшафте.
- ♦ Улучшение здоровья опорно-двигательного аппарата благодаря более сбалансированной осанке и симметричности походки
- ♦ Минимальное техническое обслуживание и высокая надежность
- ♦ Небольшой вес

ДИНАМИЧЕСКАЯ СТОПА BIOSTEP CL

Одна стопа, множество возможностей,
бесконечное наслаждение ходьбой!

Техническая спецификация

Уровень двигательной активности:



K2 ⓘ



K3



K4

Размерный ряд: 22-30

Высота конструкции: 150 мм

Высота подъема каблука: 10 мм

Вес изделия: 740 г*

* вес указан для стопы размера 26
с установленной косметической калоши



Уровень двигательной активности и Максимальный вес пользователя

Размер	K2 ⓘ	K3	K4
22-24	113кг	101кг	101кг
25-30	183кг	183кг	147кг

Юстировка

Осевая линия протезной гильзы должна проходить на 25-50 мм спереди осевой линии адаптера-пирамидки стопы BIOSTEP CL.

Пример заказа динамической стопы BIOSTEP CL

Модель	Размер	Сторона	Категория жесткости
BSCL	25	L - левая R - правая	42

для косметической калоши темного цвета
к шифру изделия добавляется литера «D»

ⓘ Подходит для наиболее активных пользователей
с уровнем двигательной активности K2



Косметическая калоша
и скользящий носок
входят в комплект
поставки

ВНИМАНИЕ: Для корректного подбора
стопы настоятельно рекомендуется
использовать специализированный
селектор от производителя!
<https://biostep.easyliner.eu/>