



Влагозащищенная
стопа



Всегда готова к приключениям !

Самая эффективная динамическая стопа среди линейки стоп BioStep.

Универсальная стопа, с дополнительной амортизацией и повышенной безопасностью при ходьбе по опорным поверхностям любых типов, прекрасная адаптация к опорной поверхности.

Рекомендуется для требовательных пользователей с высокой двигательной активностью, любящих путешествовать. Идеально подходит для пеших прогулок и треккинга, а также для активного отдыха и деятельности с высоким уровнем вертикальных ударных нагрузок.


Биомиметическая устойчивая стопа с плавным перекатом и быстрой реакцией на изменение типа опорной поверхности.

NRGTM Технология

Вдохновлена природой, усилена технологией

NRGTM — Естественная Энергосберегающая Походка (Natural Reactive Gait) — это инновационная запатентованная технология изготовления протезных стоп с динамической реакцией на изменение типа опорной поверхности предназначенная для воспроизведения естественного движения стопы, а также голенных и икроножных мышц.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

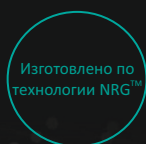

Технология
NRGTM



Уникальная
многослойная
конструкция



Динамическая
система
икроножной
области
и голени



Расщепленная
пружина
мыска стопы



Диапазон
движения
26°



Осевое
вращение
12°



Повышенная
амортизация
вертикальных
нагрузок

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Физиологическая энергосберегающая походка
- ♦ Плавный перекаат во время всего цикла ходьбы
- ♦ Прекрасная динамическая реакция на изменение типа опорной поверхности для пользователей с высоким уровнем двигательной активности
- ♦ Возможность заниматься различными видами деятельности без использования вспомогательных средств
- ♦ Прекрасная адаптация к опорной поверхности и повышенная устойчивость на неровном ландшафте.
- ♦ Улучшение здоровья опорно-двигательного аппарата благодаря более сбалансированной осанке и симметричности походки
- ♦ Минимальное техническое обслуживание и высокая надежность
- ♦ Небольшой вес

Техническая спецификация

Уровень двигательной активности:



K2 ⓘ



K3



K4

Размерный ряд: 22-30

Высота конструкции: 170 мм

Высота подъема каблука: 10 мм

Вес изделия: 840 г*

* вес указан для стопы размера 26 с установленной косметической калоши



Уровень двигательной активности и Максимальный вес пользователя

Размер	K2 ⓘ	K3	K4
22	113кг	102кг	90кг
23-24	125кг	113кг	102кг
25-30	158кг	147кг	125кг

Юстировка

Осевая линия протезной гильзы должна проходить на 25-50 мм спереди осевой линии адаптера-пирамидки стопы BIOSTEP EVO.

Пример заказа динамической стопы BIOSTEP EVO

Модель	Размер	Сторона	Категория жесткости
BSEVO	25	L - левая R - правая	42

для косметической калоши темного цвета к шифру изделия добавляется литера «D»

ⓘ Подходит для наиболее активных пользователей с уровнем двигательной активности K2



Косметическая калоша и скользящий носок входят в комплект поставки

ВНИМАНИЕ: Для корректного подбора стопы настоятельно рекомендуется использовать специализированный селектор от производителя!
<https://biostep.easyliner.eu/>