



Влагозащищенная
стопа




NRG™ Технология

Вдохновлена природой, усилена технологией

NRG™ — Естественная Энергосберегающая Походка (Natural Reactive Gait) — это инновационная запатентованная технология изготовления протезных стоп с динамической реакцией на изменение типа опорной поверхности предназначенная для воспроизведения естественного движения стопы, а также голенных и икроножных мышц.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

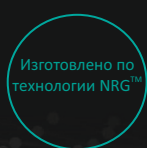

Технология
NRG™



Уникальная
многослойная
конструкция



Динамическая
система
икроножной
области
и голени



Расщепленная
пружина
мыска стопы



Диапазон
движения
26°



Осевое
вращение
16°



Цельная
монолитная
конструкция

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Физиологическая энергосберегающая походка
- ♦ Плавный перекал во время всего цикла ходьбы
- ♦ Прекрасная динамическая реакция на изменение типа опорной поверхности для пользователей с высоким уровнем двигательной активности
- ♦ Возможность заниматься различными видами деятельности без использования вспомогательных средств
- ♦ Прекрасная адаптация к опорной поверхности и повышенная устойчивость на неровном ландшафте.
- ♦ Улучшение здоровья опорно-двигательного аппарата благодаря более сбалансированной осанке и симметричности походки
- ♦ Минимальное техническое обслуживание и высокая надежность
- ♦ Небольшой вес

Техническая спецификация

Уровень двигательной активности:



K2 ⓘ



K3



K4


Размерный ряд: 22-30

Высота конструкции: 185 мм

Высота подъема каблука: 10 мм

Вес изделия: 840 г*

* вес указан для стопы размера 26 с установленной косметической калоши

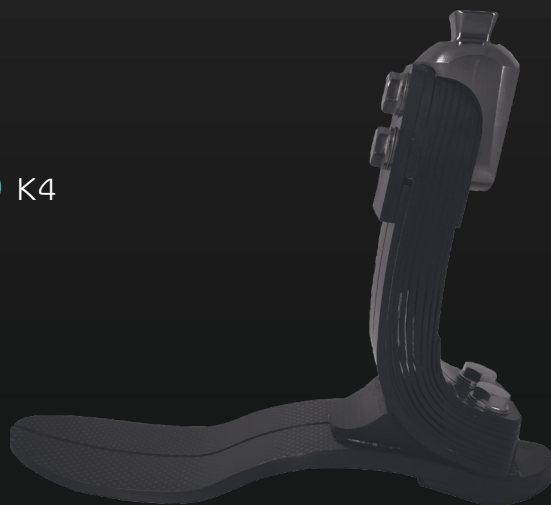

Уровень двигательной активности и Максимальный вес пользователя

Размер	K2 ⓘ	K3	K4
22-30	152кг	140кг	120кг

Юстировка

Осевая линия протезной гильзы должна проходить на 25-50 мм спереди осевой линии адаптера-пирамидки стопы BIOSTEP XT.

Пример заказа динамической стопы BIOSTEP XT

Модель	Размер	Сторона	Категория жесткости
BSEXT	25	L - левая R - правая	42

для косметической калоши темного цвета к шифру изделия добавляется литера «D»

ⓘ Подходит для наиболее активных пользователей с уровнем двигательной активности K2



Косметическая калоша и скользящий носок входят в комплект поставки

ВНИМАНИЕ: Для корректного подбора стопы настоятельно рекомендуется использовать специализированный селектор от производителя!
<https://biostep.easyliner.eu/>